



AKTARAN T1 PLUS

Kullanma Kılavuzu

 Mec Çözüm Ortaklığı / Kullanım Videosu



Cihaz Seri No:

2024-04 (2.2)



Teknik Servis Hizmetleti



Tel : 0216 540 13 84
Gsm : 0549 488 57 57
Fax : 0216 314 84 78
mail : info@meccozum.com
Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad.
No: 904 A Ümraniye - İstanbul



UYARI! Bu kullanım kılavuzunun ve özellikle güvenlik talimatları nın ihlali, AKTARAN T1 PLUS aracının bozulmasına yol açabilir, kullanan kişiyi veya yükü ve cihazın hemen etrafındaki kişileri tehlikeye atabilir. Yüksek tehlike riski mevcuttur! Aykırı davranışlarda garanti ve sorumluluk hakları düşer!



Ürün, son teknolojiye ve buna bağlı güvenlik tekniği gerekliliklerine uygundur. Buna rağmen küçük ölçüde bir artık risk olabilir. Lütfen bunun için güvenlik talimatlarına uyun

Merkez Ofis

Satış Destek : 0549 487 57 57 Teknik Destek : 0549 488 57 57

Kullanım alanı ve amaca uygun kullanım

Bu kullanım kılavuzu **AKTARAN T1 PLUS** için hazırlanmıştır.

Merdiven tırmanıcı **AKTARAN T1 PLUS**, kişilerin büyük bir çaba harcamadan merdivenden güvenli şekilde çıkarılıp indirilmesini mümkün kılar. İç ve dış mekânlardaki merdivenlerde de kullanılabilir. Eğik yüzeylerde kullanmak da mümkündür.

Merdiven tırmanıcı bir operatör tarafından sürülmek için geliştirilmiştir. Bu kişi, eğitilmiş bedensel ve ruhsal açıdan **AKTARAN T1 PLUS** aracını güvenle kullanabilecek halde olmalıdır. Yeterli bir görme yeteneği, kullanım için mutlaka gereklidir! 18 yaşından Küçük reşit olmayan ki **AKTARAN T1 PLUS** araçlarını kullanamazlar! 18 yaşından büyük

Olup reşit olmayanlar, **AKTARAN T1 PLUS** r m sadece gözetim altında kullanabilirler. Bu

Merdiven tırmanıcının kullanımı yüksek bir risk doğurabileceği göz ardı edilmemelidir.

Merdiven tırmanıcı teknik ve görünüş olarak farklı olsa bile kullanım açısından farklı değildir. Cihazın seri numarasını kumanda panelinde görebilirsiniz. **AKTARAN T1 PLUS** aracında izin verilmiş toplam ağırlık 200 kg' dır

AKTARAN T1 PLUS - Düz ve sahanlık merdivenlerde kullanıma uygundur.

Spiral ve dönüşlü merdivenler kullanılmaz !!!

İÇİNDEKİLER

Teknik Servis Bilgisi	2
Kullanım Alanları ve Amaca Uygun Kullanım	3
Genel Güvenlik Talimatı	5
Semboller ve Güvenlik	6
Uyarılar	7
Amaca Uygun Olmayan Kullanım	8
Paketleme	9-10
Cihaza Genel Bakış	11-12
Ölçülendirme	13
Teknik Veriler	14
AKTARAN T1 PLUS Opsiyonel Aksesuar -Mebran	15-19
Sürüş Talimatları	20
Kullanım Uyarıları	21
Acil Durum	22
Akü ve Şarj Aleti	23
Cihaz Temizliği / Güvenlik	24
Tekrar Kullanım ve Bertaraf Etmek	25
Hatalı durum ve Problem Çözme	26
Garanti ve Sorumluluk	26
Garanti Belgesi	27-28
Kullanıcı Sertifikası	29

GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI

Semboller Ve Güvenlik Talimatları



TEHLİKE - Doğrudan tehdit eden TEHLİKE

Kaçınılmazsa ağır yaralanmalara neden olur!



UYARI - Muhtemel tehdit eden TEHLİKE

Kaçınılmazsa ağır yaralanmalara neden olur!



DİKKAT - Muhtemel tehdit eden tehlike veya zararlı durum

Kaçınılmazsa hafif yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir!

ÖNEMLİ !



İşleme almadan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve uyarıları / güvenlik talimatlarını dikkate alın.



Okuma zayıflığı halinde eğitim içeriklerini sözlü olarak derinleştirin.



Kullanım kılavuzunu, okuduktan sonra özenle muhafaza edin.



Sadece zor alev alan maddelerden oluşmaz - ateş kaynaklarından uzak tutun.



Sağlamlık testleri laboratuvar şartlarında uygulanmıştır.

AKTARAN T1 PLUS CİHAZI SADECE EĞİTİMLİ KİŞİLER TARAFINDAN KULLANIMA UYGUNDUR.

* Satın alınan ürünü kullanacak operatöre MEC ÇÖZÜM tarafından eğitim verilir.
Ancak sertifikalandırma işleminden sonra başlanabilir.



Ürünün eğitimsiz kişiler tarafından kullanılması tehlikeli ve yasaktır.



UYARI

Ezilmelerden kaçınmak için, cihaz çalışır halde iken dönen / hareket eden parçalara hiç bir zaman dokunmayın !



TEHLİKE

Mevcut yüksek görme engeli ve / veya körlük halinde AKTARAN T1 PLUS kullanılamaz !

İzin verilmiş toplam ağırlığı ve azami kişi ağırlığını aşmayınız, çünkü AKTARAN T1 PLUS aracının bozulmasına veya zorlanmasına neden olabilir !

Yükün düşmesi, devrilmesi sebebiyle yaralanmaları ve maddi hasarları önlemek için, yürüyen merdivenler veya taşıyıcı bantlar üzerinde kullanmayın !

AMACA UYGUN OLMAYAN KULLANIM

AKTARAN T1 PLUS aracı , řu durumlarda kullanılamaz:

Eęer kullanıcı eęitim almamıřsa / rn konusunda bilgilendirilmemiřse!

Eęer kullanıcı 18 yařından kk ise!

Eęer 18 yařından bk reřit olmayanlar iin bir gzetici mevcut deęilse!

Eęer kullanıcı bedensel ve ruhsal aıdan AKTARAN T1 PLUS aracını gvenle kullanabilecek halde deęilse!

Eęer kullanıcı yeterli grme yeteneęine sahip deęise!

Eęer yaęmur , ıslaklık , kar veya buzlanma sebebiyle fren etkisi kısıtlanmıřsa!

Eęer AKTARAN T1 PLUS aracının tek taraflı ya da iki taraflı fren etkisi gerekleřmezse !

Eęer yryen merdivenlerin veya tařıyıcı bantların kullanılması gerekiyorsa !

Eęer yakında hayat koruyucu fonksiyonlara sahip tıbbi cihazlar ve teřhis cihazları bulunuyorsa !

Eęer amaca uygun kullanıma muhalif davranılırsa !

PAKET ÜZERİNDEKİ SEMBOLLERİN AÇIKLANMASI VE KARGO

Sembol	Açıklama
	Dikkatli davranın Paket ve ürüne dikkatli davranılmalıdır.
	Islaklıktan koruyun Paket ve ürünü yüksek nemden koruyun. Üzerini örterek depolayın. Gerekirse branda ile özenli şekilde kapatın.
	Dikkat kırılabilir Paket ve ürüne özenle davranın ve kesinlikle devirmeyin.
	Bu taraf yukarı Paket, oklar daima yukarıyı gösterecek şekilde depolanmalı ve taşınmalıdır. Paketi yuvarlayarak veya aşırı yatırarak bu kuralın ihlalinin kaçınılmalıdır.

KARGO : Satılan ürünler Mec Çözüm Ortaklığı tarafından ürüne uygun tasarlanmış ve üzerine yukarıdaki uyarı etiketleri ile birlikte İstanbul içine elden teslimat, diğer iller kargo , yurt dışı ise müşterinin talebine göre nakliye edilmektedir.

Teslimat Kapsamı



Şarj aleti , kılavuz ve cihaz, Akü paketi

CİHAZA GENEL BAKIŞ AKTARAN T1 PLUS



CİHAZA GENEL BAKIŞ AKTARAN T1 PLUS

Tablanın Kapalı Hali



Tablanın Açık Hali






Üzerinde bulunan 4 adet
tekerlek manevra kabiliyetini
arttırmak için.

CİHAZA GENEL BAKIŞ AKTARAN T1 PLUS



Cihazın her iki tarafında bulunan, ayarlanabilir sabitleme kancaları mevcuttur. Cihazın çantasında bulunan spanzet ile gerdirerek, yükü sabitleyiniz.

AKTARAN T1 PLUS

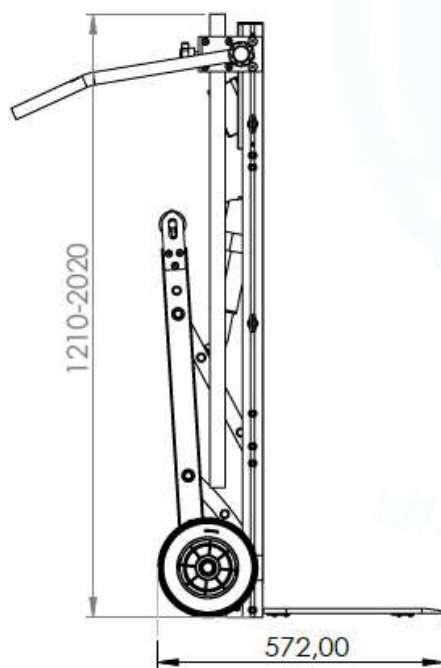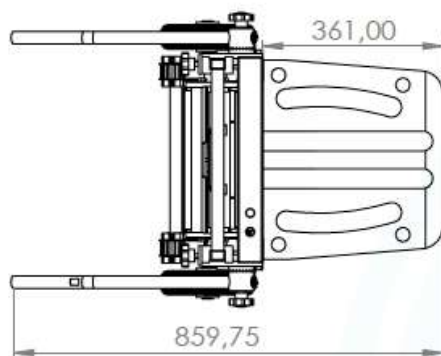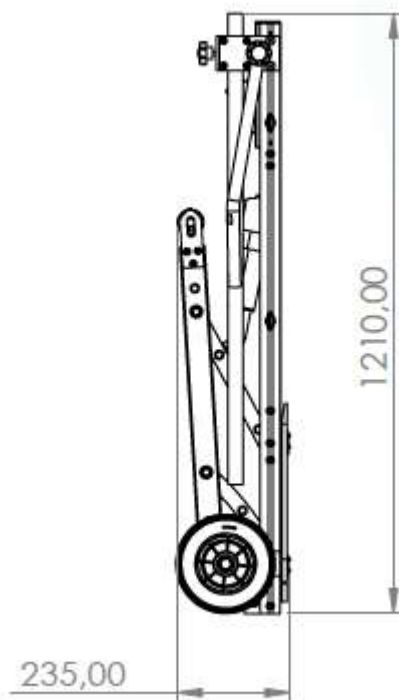

Teknik veriler



UYARI İzin verilmiş toplam ağırlık ve azami kişi ağırlığını aşmayınız, çünkü bu durum AKTARAN T1 PLUS aracının bozulmasına veya zorlanmasına neden olabilir!

Teknik	AKTARAN T1 PLUS
Ebatlar	Genişlik: 59 cm Yükseklik: 120-200 cm Derinlik: 23,5 cm
Aracın ağırlığı	Tırmanma ünitesi: 40 kg Akü paketi: 2.4 kg
Azami Yük Ağırlığı	200 kg
Tırmanma hızı ¹⁾	8 - 23 basamak / dakika (sürekli ayarlanabilir.)
Bir akü şarjıyla ulaşma mesafesi ¹⁾	1 dk 15 basamak (1 basamak zm:sn = 0,5)
Azami basamak yüksekliği	180/ 250 mm (tırmanma yüksekliğini artırma halinde)/ 35°
Asgari basamak derinliği	300 mm
Gerekli merdiven genişliği (düz merdiven)	700 mm
Akü(LİTYUM-İON)	25.9 V 12.8 Ah
Doğru akım motoru	24 V / 180 Watt
Tam Dolu Akü ile Sürüş	Maks. Yükte 35 kat (Kat yüksekliği 3 metre)
Seri Numarası Etiketİ	Operatör gösterge panelinin üstünde ve Kullanım kılavuzunun önünde

1) Etkinleştirilmiş konfor basamağında, tırmanma hızı ve ulaşma mesafesi düşer. Ulaşma mesafesi, yolcunun ağırlığına da bağlıdır.

AKTARAN T1 PLUS (OPSİYONEL AKSESUAR)



KOLLARI AYARLAMA AKTARAN T1 PLUS



UYARI - Kol ayarlarının kendiliğinden değişmemesi için kollar, sabitleme civatalarıyla sağlam bir şekilde sabitleştirilmiş olmalıdır !

TEHLİKE!

X

Bu cihaz döner merdivende kullanmaya uygun değildir.

AKTARAN T1 aracı , uygun olmayan merdivenlerde kullanılamaz, aksi takdirde merdivenden düşmeye sebep olabilir!


Merdiven inme - Döner merdivenler

Döner merdivenlerde kullanımda bölüm 8.5>de açıklanan adımlar uygulanmalıdır.


Lütfen dikkat edin: Bir döner merdivende (sahanlıklı düz merdiven) AKTARAN T1 aracı, merdivenin dönüşüne göre ayarlanmalıdır. Her iki tekerlek, her tırmanma işleminde merdivenin köşesine dayanmalıdır.

AKTARAN T1 PLUS


•Operatör Kumanda Paneli

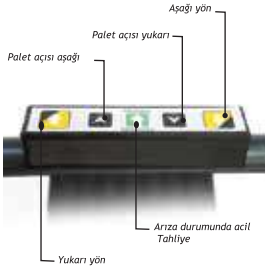


•Operatör Kumanda Paneli

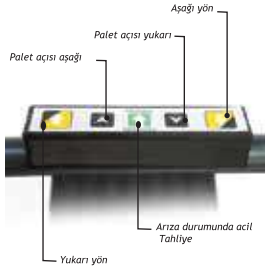

•Operatör Gösterge Paneli

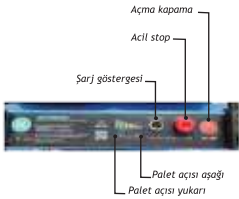

•Operatör Gösterge Paneli

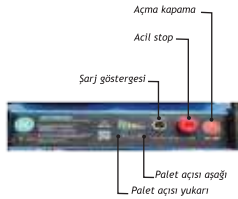

YÜK KONUMLANDIRMA

AKTARAN T1 LARGE / XLARGE

- 1) Cihazın taşıma tablasını açın
- 2) Yükünüz veya eşyanızı cihazın sırt kısmı uzun kısma iyiye yaslayın
- 3) Cihazın sağında veya bulunan sıpanzeti yükün etrafından geçirip iyice gerdirip kitlendiğine emin olun
- 4) Yükün stabilize olduğuna emin olduktan sonra çalışma talimatlarını izleyin



ÇALIŞTIRMA / (TALİMAT FOTOĞRAFLARI SIRASIYLA 18 VE 19 SAYFALARDA YER ALMAKTADIR)

- 1) Cihazın kontrol panelinde bulunan acil stop butonu üzerindeki ok yönlerinde gösterildiği gibi sağ yönde hafifçe çeviriniz.
- 2) Cihazın panelinde bulunan on off düğmesine 2 saniye boyunca basıp enerjiyi aktif ediniz.
- 3) Kontrol panelinde bulunan şarj göstergesi ışıklarını kontrol ediniz
- 4) Şarj göstergesinin altında bulunan palet konumlandırma tuşlarını kontrol edin, bu tuşlar merdivenlere tırmanma esnasında yükün konumlandırması için kullanılır
- 5) Yükü yada eşyanızı cihazın tablasına yerleştirin cihazın sağında yada solunda bulunun sabitleme kemerini yükü stabil edene kadar gerdiren.
- 6) Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra cihazı tutma kulplarından geriye doğru basamaklara konumlandırın

7) Operatörün taşıma işlemindeki ilk konumu tırmanma başlangıcında, ikinci basamakta pozisyon alması gerekir

8) Operatör cihazın arkasında pozisyon aldığı anda cihazın sırtında bulunan çevirme kulbunu bir elinizle sağ yöne doğru çevirip diğer elinizle operatör kolçağını yukarı yönde yükseltin.

9) Operatör kolçaklarından iki elle tutup paletlerin arasında bulunan destekle ayak yardımı ile cihazı basamaklara yerleştirin. Cihaz paletlerinin basamaklara tamamen yaslandığından emin olun.

10) Cihazın üzerinde bulunan yükü tutma kolçağında bulunan palet aç konumlandırma tuşlarıyla geriye doğru paletin açısını ayarlayın

11) Operatör tırmanma esnasında kolçaklara aşağı yönde pozisyonda hafifçe kuvvet uygulayarak sağda bulunan yön tuşuna basparmağı ile basıp tırmanmaya başlayın.

12) Tırmanma esnasında palet dışlarının rıht aralarına tutunduğu kontrol edin (standart olmayan rıht aralıklarında sekme yapabilir.)

13) Cihazın tablasının önünde bulunan sağlı sollu 2 adet tutma kulpları bulunmaktadır. Bu kulplar yük taşıma esnasında ikinci operatörün destek vermesi için tasarlanmıştır. (Havaleli ve ağır yüklerde operatörü desteklemek, dönüşlerde destek içindir)

14) tırmanma sürüşü esnasında sahanlığa ulaşmadan paletler iki basamakta duracak şekilde konumlanıp operatör kolçağını aşağı yönde küçültüp ikinci operatör kolundan tutarak sağda bulunan yeşil kırmızı yön tuşları ile cihazı yukarı dik pozisyonlandırıp sahanlığa geçiş yapınız.

15) Sahanlıkta manevra için cihazın arkasında bulunan operatör tutamaklarıyla pozisyon alınız. (Taşıma tablası altında yer alan 360 derece tekerlekler manevra kabiliyetini yükseltmek için tasarlanmıştır.)

16) İniş esnasında operatör merdivenlere pozisyonlandırıp ikinci operatör kolunu iki elle tutup palet arasında bulunan destek ayağından güç alarak 15-20 derece eğerek geriye doğru palet uçları yere temas edince kol üzerinde bulunan yeşil /kırmızı yön tuşu ile basamaklarını inin.

17) İniş esnasında paletler 3 basamağa aynı anda temas ettiği esnada cihazı durdurup ayarlanabilir kolçağı yukarı doğru uzatın.

18) İniş esnasında rıht yüksekliklerinden farklı rıht yüksekliklerine ve geçişlerde palet çarpmalarını ortadan kaldırmak için tutma kolunu aşağı yönde bastırın cihaz son basamağı geçip yere temas edinceye kadar cihazı durdurup tekerleri üzerinde cihazı pozisyonlandırıp operasyonu tamamlayın.



01




02



03



04

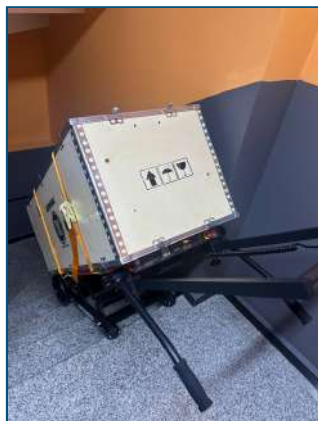

05



06



07



08



09



Kullanım Uyarıları



TEHLİKE - Sadece **yük taşıma amacı ile AKTARAN T1 PLUS** aracını kullanabilme Durumunda olan eğitilmiş bir kişi tarafından kullanılabilir!



TEHLİKE - **AKTARAN T1 PLUS** aracının altında tehlike alanında herhangi bir kişi bulunmamalıdır!



TEHLİKE - Her kullanımdan önce güvenlik frenleri kontrol edilmelidir! (bak. Bölüm 6.6)



UYARI - Merdivenden kaymayı önlemek için kaymaz ayakkabı giyiniz!



UYARI - Tehlike durumlarını önlemek ve tırmanma işleminin güvenli olmasını sağlamak için, daima iki elle kullanın!



UYARI — Cihazı Şarj ederken ACİL STOP butonunun açık olduğundan emin olun.

0

NOT - Yük olmadan ve tek basamak çalıştırma işlemini talim edin.

O

NOT - Merdiven basamağının derinliğine ve yapısına dikkat edin ! Düşme tehlikesi

Acil Durum

AKTARAN T1 PLUS aracı, merdiven basamaklarında zemin üzerinde olmalıdır.
Cihaz lift konumlandırma butonuyla ayarladıktan sonra ACİL STOP butonu ile kapatınız.

Park etme

- NOT - Aküleri her kullanımdan sonra doldurun.
- NOT - AKTARAN T1 PLUS aracını dikey şekilde yerleştirin.

Paleti kullanıcı panelinden On-off tuşu ile kapatıp , toz , nem veya su ile temas etmeyeceğinden emin olduğunuz bir yere konumlayın.

Nakliye



UYARI - Münferit parçaların ağırlık bilgilerine dikkat edin!



UYARI - Araçlar içinde taşınması halinde geçerli kanuni şartları sağlayın !



DİKKAT - AKTARAN T1 aracını nakliye sırasında kapatın !

Akü ve Şarj Aleti



NOT - İki yılda bir güvenlik tekniği kontrolü yapılması tavsiye edilir! Kontrol etiketi, kontrolün yapılacağını en geç zaman hakkında bilgi verir.

Tavsiye: Tekrar kullanımdan sonra / Kullanıcı değişirme!



DIKKAT - Elektrik çarpmasını ve arızaları önlemek için, nemden koruyun ve nemli ellerle dokunmayın!



NOT - Aküleri her kullanımdan sonra doldurun.



NOT - Şarj aletini yağ gres agresif temizlik maddeleri, tiner veya hasarlardan koruyun.



NOT - Şarj alet kullanım kılavuzuna uyun.



NOT - Akünün tamamen boşalması, kapasite kaybına sebep olur ve kullanım ömrünü kısaltır.



NOT - Aküyü göndermeden önce (tamirat, bertaraf etme vs...) Akü paketini emniyetli bir şekilde paketleyin. Özel bir karton gerekli değildir.

Yeni aküler, ancak birkaç defa doldurulduktan sonra tam kapasiteye ulaşır. Aküler, bakım gerektirmez ve tekrar doldurulabilir.



Fişlerinizi temiz tutun



LED kırmızı = akü dolduruluyor



LED yeşil= akü dolu

Temizlik



UYARI - Temizlik süresince sigara içmeyin!



UYARI - Aracın içine nem girmemelidir!



Sadece nemli bezler kullanın. Islak bezleri kesinlikle kullanmayın!



NOT - AKTARAN T1 aracını ateş kaynaklarından uzak tutun!

NOT - Yüksek basınçlı temizleyici kullanmayın!

Kumaş yüzeyleri ve ciltle temas eden yüzeyleri, ihtiyaç halinde temizleyin.

- » Evde kullanılan temizlik maddelerini kullanın. Diğer tüm parçaları da yumuşak ev tipi temizlik maddeleriyle silin.
- » Her kullanımda temizlik maddesi üreticilerinin talimatlarına uyun!

Dezenfekte ihtiyacı olması halinde, evde kullanılan dezenfeksiyon maddelerinden kullanın ve üretici talimatlarına uyun. Silerek dezenfekte edin.



Sigortaları değiştirme

NOT - Bozuk sigortaları tamir etmeyin veya köpürülemeyin!

NOT - Sigorta sıkça yanarsa, üretici veya yetkili satıcıyla iletişime geçin!

Güvenlik tekniği açısından inceleme



UYARI - Güvenlik tekniği açısından inceleme, sadece üretici, MEC DANIŞMANLIK servisi veya yetkili satıcı tarafından gerçekleştirilebilir!



UYARI - Her iki yılda bir güvenlik tekniği kontrolü yapılması tavsiye edilir! Kontrol etiketi, kontrolün yapılacağı en geç zaman hakkında bilgi verir!

Tavsiye: Tekrar kullanımdan sonra / Kullanıcı değiştirmek!


Güvenlik tekniği açısından inceleme yapabilmek için bir eğitim gereklidir. Daha fazla bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz. www.meccozum.com

Tekrar kullanım (Kullanıcı deęiřtirme)

Resmi iřlemler (ruhsatlandırma vb.)iin satın alınan rnler tekrar kullanıma uygun deęildir.

Bertaraf etme

AKTARAN T1 aracınız ve aks uzun mrl rnlerdir. Doęal mrn doldurduktan sonra bu rnleri, Mec zm Danıřmanlık řirketine veya bayilerine bertaraf edilmek zere gnderebilirsiniz.

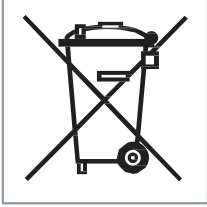

AKTARAN T1 aracı ve aks, ilgili lkede meri gncel kanunlara gre ngrlmeyen yerlerde bertaraf edilemez (mesela plkler). evreye zararlı olduęu belirlenebilecek maddeler ierebilir.

AKTARAN T1 PLUS aracı uzun sre kullanılmazsa, (mesela birkaç ay)

ařaęıdakilere uyun: Aracın iine nem girmemelidir.

AKTARAN T1 PLUS aracını, kuru meknlarda ve nemi yksek olmayan yerlerde depolayın, gerekirse folyoyla kapatın! Srekli gneř iřıęından koruyun!

Yetkisiz kiřiler ve zellikle ocuklar, AKTARAN T1 aracının depolama alanına gzetimsiz eriřim imknına sahip olmamalıdır!

AKTARAN T1 tekrar iletiřime alınacaksa, nce temizleyin. Gvenlik teknięi aısından inceleme gerekip gerekmedięini kontrol edin.

Gvenlik teknięi aısından inceleme gerekliyse, iřletime almadan nce elektrik fonksiyonu ve gvenlik frenleri mutlaka test edilmelidir!



UYARI - Anormal gelen tm alıřma tarzlarında, tehlikeli durumları nlemek iin MM-57 aracını kullanmayı bırakın!

Mec zm teknik servisi ile hemen iletiřime gein ve cihazı kullanmayı bırakın.

Problem Çözme Yöntemleri

Problem Çözme Yöntemleri

Problem	Test ve muhtemel problem çözümleri
AKTARAN T1 aracı çalışmıyor	Spiral kablo bağlantısı takılı ve kilitli mi? Hayır: takın ve kilitleyin.
	Şarj aleti takılı mı? Evet: Şarj kablosunu çıkarın.
	Akü boş mu? Evet: Aküyü doldurun.
	Problem hala mevcut mu? Evet: Üreticiyi, Mec Çözüm Danışmanlık yetkili satıcıyı bilgilendirin.
AKTARAN T1 aracı sürülmüyor	Emniyet butonu açık Evet: Çevirerek kapalı konumuna getirin.
Aküler doldurulamıyor	DANIŞMANLIK servisini, yetkili satıcıyı bilgilendirin.
Akülerde hangi hasarlar var	MEC DANIŞMANLIK servisini, yetkili satıcıyı bilgilendirin

GARANTİ VE SORUMLULUK

MEC DANIŞMANLIK firması, AKTARAN T1 PLUS aracı (Lityum aküler hariç) ve tüm aksesuar parçaları için, müşterinin aracı aldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle araçta malzeme ve üretim hatalarının bulunmadığı garantisini vermektedir.

Aküler için MEC DANIŞMANLIK firması, müşterinin aküyü aldığı tarihten itibaren 6 ay boyunca garanti vermektedir.

AKTARAN T1 aracı ile ilgili garanti, aş aş ıdkinedenlere bağ ı olarak ortaya çıkan arızaları kapsamaz:

- Aşırı yüklenme sonucu ortaya çıkan hasarlar.
- Dikkatsiz kullanım nedeniyle oluşan hasarlar.
- Şiddete dayalı hasarlar.
- Doğal aşınma parçalar (kauçuk paletler)
- Müşteri tarafından yapılan usulüne uygun olmayan veya yetersiz bakım.
- Yetkisiz yapısal değişiklikler veya AKTARAN T1 PLUS aracının veya aksesuar parçalarının amacına aykırı şekilde kullanılması
- AKTARAN T1 aracının izin verilmiş toplam ağırlık veya azami yük ağırlığı üzerinde kullanılması.
- Aküleri usulüne aykırı şarj etme.

MEC DANIŞ MANLIK firması, AKTARAN T1 PLUS aracının üreticisi olarak aş aş ıdkinedenlerden oluş an Hasarlar için sorumlu değ ildir:

- AKTARAN T1 aracının usulüne aykırı kullanıldıysa.
- Tamirat, montajlar veya diğer işler yetkisiz kişilerce yapıldıysa.
- AKTARAN T1 aracı kullanım kılavuzuna aykırı kullanıldıysa.
- Yabancı parçalar takıldı veya AKTARAN T1 PLUS aracına bağlandıysa.
- AKTARAN T1 aracının parçaları söküldüyse.
- AKTARAN T1 aracı, izin verilmiş toplam ağırlıktan veya azami kişi ağırlığından fazla yüklendiyse.
- AKTARAN T1 arasına; üretici, MEC DANIŞMANLIK servisi veya bir yetkili satıcı tarafından düzenli bir şekilde (2 senelik aralıklarla) bakım yapılmadıysa.
- Reşit olmayan kişiler AKTARAN T1 aracını denetimsiz şekilde kullanırsa (denetim altında eğitilmiş 18 yaş üstü reşit olmayan gençler hariç).
- AKTARAN T1 PLUS aracı yetersiz aküyle çalıştırıldıysa.

Geri çağ ırmalar ve düzeltici tedbirler

AKTARAN T1 PLUS aracınızın kullanılmasıyla ilgili yeni ve önemli güvenlik bilgilerinin mevcut olması halinde, tarafımızdan bilgilendirilirsiniz. Başta da söylendiği gibi, internet sayfamızda bu kullanım kılavuzunun daima güncel sürümünü görebilirsiniz.

Sonradan değişiklikler veya üründe düzeltici tedbirler alınması gerekmesi durumunda, sizi ve /veya yetkili satıcımızı bundan etkilenecek tüm seri numaraları hakkında bilgilendiririz. Eğer AKTARAN T1 PLUS aracınız bir geri çağırma aksiyonuna dahil olursa, daha sonra sonraki bütün süreç hakkında bilgilendirilirsiniz.

GARANTİ BELGESİ

MEC ÇÖZÜM ORTAKLIĞI

AKTARAN T1 PLUS



Cihaz Seri No: 2024_____

*İş Bu belge geçerlilik süresi, ilgili seri numaralı cihaz için kesilmiş
fatura tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerlidir.



Mec Çözüm Ortaklığı Mak. Dış. Tic. Ltd. Şti

Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad.
No: 904 / A Ümraniye - İstanbul
Tel: 0216 540 13 84

Malın

Cinsi : Yük Taşıma Cihazı
Markası : AKTARAN
Modeli : AKTARAN T1 PLUS

Garanti Süresi : 2 YIL / Akü - 6 Ay
Azami Tamir Süresi : 15 İş Günü
Bandrol ve Seri No : 0509

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın aküsü 6 ay diğer parçaları 2 yıl garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı;
işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin anızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın anızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



Kullanıcı Eğitim Sertifikası

Sayın,

Tarih : / /

Yeterlilik ölçęi kapsamında tüm bilgi ve eğitimi alarak AKTARAN T1 PLUS merdiven tırmanma cihazını kullanmaya tam yetkilidir.

ADI SOYADI:

T.C Kimlik No.:

ADI SOYADI:

T.C Kimlik No.:

Cihaz Seri No:

TSE ISO 7176 28 Kasım 2014



Sertifika Yeterlilik Ölçeęi

Tarih : / /

Ařaęıda ki soruları Mec Çözüm Ortaklıęı Teknik personeli ile doldurun tüm soruların cevapları evet ise cihazı kullanmaya başlayabilirsiniz.

☐ Kullanma Klavuzunu Dikkatlice Okudum.

☐ Kullanma klavuzunda anlamadıęım bir yer olmadı.

☐ Mec Çözüm personeli tarafından ürünü kullanmayı yerinde öğrendim.

☐ Cihazı farklı bir yere taşımam gerektięinde sökme-takma işlemlerinin nasıl olması gerektięini biliyorum.

☐ Cihazı şarę etme ve akü bakımlarının önemini anladım.

☐ Cihazı şarę etmeyi ve akü bakımlarını yapılabiliyorum.

☐ Cihazı uzun süre kullanmadıęımda nasıl depolamam gerektięini biliyorum.

Operatöre cihaz kullanım kuralları öğretildi, yukarıda soruların hepsi “ EVET “ olduğundan cihaz teslim edildi.

TESLİM EDEN PERSONEL



Notlar:

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.



Satış Destek
0549 487 57 57

Teknik Destek
0549 488 57 57
info@meccozum.com



www.meccozum.com

