

MM-57 A1 / SP1 / A2

Kullanma Kılavuzu

 Mec Çözüm Ortaklığı / Kullanım Videosu



Cihaz Seri No:

2019-03 (2.1)



MM - 57 A1 Teknik Servis Hizmetleti



Tel : 0216 540 13 84
Gsm : 0549 488 57 57
Fax : 0216 314 84 78
mail : info@meccozum.com
Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad.
No: 904 A Ümraniye - İstanbul



UYARI Bu kullanım kılavuzunun ve özellikle güvenlik talimatlarının ihlali, MM-57 aracının bozulmasına yol açabilir, kullanan kişiyi veya yolcuyu ve cihazın hemen etrafındaki kişileri tehlikeye atabilir. Yüksek tehlike riski mevcuttur! Aykırı davranışlarda garanti ve sorumluluk hakları düşer!



Ürün, son teknolojiye ve buna bağlı güvenlik tekniği gerekliliklerine uygundur. Buna rağmen küçük ölçüde bir artık risk olabilir. Lütfen bunun için güvenlik talimatlarına uyun.

Merkez Ofis

Satış Destek : 0549 487 57 57 Teknik Destek : 0549 488 57 57

Mec Çözüm Ortaklığı Danışmanlık Makine Dış.Tic.Ltd.Şti

MM-57 A1 ,MM-57 SP1 ve MM-57 A2 cihazının TSE standartlarına uygun olduğunu beyan eder.

Ürünümüz yerli ürün olmasının yanı sıra içinde kullanılan diğer destek ürünlerinin de özenle yerli ürünlerden temin ederek tasarıma sunulmuştur. Bu cihaz engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı olan kişiler dışında aynı zamanda kullanıcı açısından da basit ve güvenilir olarak tasarlanmıştır.

MM-57 A1 Ürünümüz engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı bireyleri 130 kg' a kadar kendi sandalye bölümüne naklederek spiral ve düz merdiven için uygundur.

MM-57 A2 Ürünümüz ise engelli veya hareket kısıtlılığı olan bireyleri 160 kg'a kadar kendi tekerlekli sandalyeleri ile birlikte transfer etmektedir.

Ürünlerimizde önceliğimiz güven ve konfordur.

MEC ÇÖZÜM yerli üretim olan MM-57 A1 ,MM-57 SP1 ve MM-57 A2 cihazlarını hizmetinize sunmaktan gurur duyar

Genel Müdür
Mehmet MUSLU

Kullanım alanı ve amaca uygun kullanım

Merdiven tırmanıcı MM-57, kişilerin büyük bir çaba harcanmaksızın merdivenden güvenli şekilde çıkarılıp indirilmesini mümkün kılar. İç ve dış mekanlardaki merdivenlerde de kullanılabilir. Eğik yüzeylerde kullanmak da mümkündür.

Merdiven tırmanıcı, bir kişi tarafından sürölmek için geliştirilmiştir. Bu kişi, eğitilmiş, bedensel ve ruhsal açıdan MM-57 aracını güvenli kullanabilecek halde olmalıdır! Yeterli bir görme yeteneđi, kullanım için mutlaka gereklidir! 18 yaşından küçük reşit olmayan kişiler, MM-57 araçlarını kullanamazlar! 18 yaşından büyük olup reşit olmayanlar, MM-57 araçlarını sadece gözetim altında kullanabilirler. Bu merdiven tırmanıcının kullanımı yüksek bir risk doğurabileceđi ve tekerlekli sandalye kullanmaktan daha fazla beceri gerektirdiđi göz ardı edilmemelidir.

Bu kullanım kılavuzu MM-57 A1 ,MM-57 SP1 ve MM-57 A2 tipleri için genel olarak hazırlanmıştır.

Merdiven tırmanıcıları, teknik ve görünüş olarak farklı olsa bile kullanım açısından farklı değildir. Bu iki versiyondan hangisine sahip olduğunuzu seri numarasından görebilirsiniz. MM-57 A1 **ve MM-57 SP1** aracında izin verilmiş toplam ağırlık 130 kg'dır. MM-57 A2 aracı 160 kg toplam ağırlık için tasarlanmıştır. Bu kullanım kılavuzunda ki tüm bölümler, her iki model için geçerlidir.

MM-57 / A1- Düz ve sahanlık merdivenlerde kullanıma uygun
MM-57 / SP1 Spiral (Dönerli) merdivenler kullanımına uygun
MM - 57 / A2 Düz ve sahanlık merdivenlerde Tekerlekli Sandalye ile kullanımı uygundur.

İÇİNDEKİLER

Teknik Servis Bilgisi	2
Kurucu Hitabı	3
Kullanım Alanları ve Amaca Uygun Kullanım	4
Genel Güvenlik Talimatı	6
Semboller ve Güvenlik	a
Uyarılar	b
Amaca Uygun Olmayan Kullanım	7
Uyarılar	8
Paketleme	9
Cihaza Genel Bakış	10-11
Ölçülendirme	12
Teknik Veriler	13
A1- A2 ve MM-57 SP1 Opsiyonel Aksesuar -Mebran	14-15
Sürüş Talimatları	16
Kullanım Uyarıları	17
Acil Durum	18
Akü ve Şarj Aleti	19
Cihaz Temizliği / Güvenlik	20
Tekrar Kullanım ve Bertaraf Etmek	21
Hatalı durum ve Problem Çözme	22
Garanti ve Sorumluluk	23
Garanti Belgesi	24-25
Kullanıcı Sertifikası	26-27

GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI

Semboller Ve Güvenlik Talimatları



TEHLİKE - Doğrudan tehdit eden TEHLİKE

Kaçınılmazsa ölüm veya ağır yaralanmalara neden olur!



UYARI - Muhtemel tehdit eden TEHLİKE

Kaçınılmazsa ölüm veya ağır yaralanmalara neden olur!



DİKKAT - Muhtemel tehdit eden tehlike veya zararlı durum

Kaçınılmazsa hafif yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir!

ÖNEMLİ !



İşleme almadan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve uyarıları / güvenlik talimatlarını dikkate alın.



Okuma zayıflığı halinde eğitim içeriklerini sözlü olarak derinleştirin.



Kullanım kılavuzunu, okuduktan sonra özenle muhafaza edin.



Sadece zor alev alan maddelerden oluşmaz - ateş kaynaklarından uzak tutun.



Sağlamlık testleri laboratuvar şartlarında uygulanmıştır.

MM - 57 A1 VE MM - 57 A2 MM-57 SP1 CİHAZLARI SADECE EĞİTİMLİ KİŞİLER TARAFINDAN KULLANIMA UYGUNDUR.

* Satın alınan ürünü kullanacak operatöre MEC ÇÖZÜM tarafından eğitim verilir.
Ancak sertifikalandırma işleminden sonra başlanabilir.



Ürünün eğitimsiz kişiler tarafından kullanılması tehlikeli ve yasaktır.

AMACA UYGUN OLMAYAN KULLANIM

MM - 57 A1 / A2 , MM-57 SP1 aracı , şu durumlarda kullanılamaz:

Eğer kullanıcı eğitim almamışsa / ürün konusunda bilgilendirilmemişse!

Eğer kullanıcı 18 yaşından küçük ise!

Eğer 18 yaşından büyük reşit olmayanlar için bir gözetici mevcut değilse!

Eğer kullanıcı bedensel ve ruhsal açıdan MM - 57 A1 ve MM - 57 A2 , MM-57 SP1 aracını güvenli kullanabilecek halde değilse!

Eğer birden fazla kişi kendi başına oturamazsa!

Eğer taşınacak kişi kendi başına oturamazsa !

Eğer kullanıcı yeterli görme yeteneğine sahip değilse!

Eğer yağmur , ıslaklık , kar veya buzlanma sebebiyle fren etkisi kısıtlanmışsa!

Eğer MM - 57 A1 ve MM - 57 A2 , MM-57 SP1 aracının tek taraflı ya da iki taraflı fren etkisi gerçekleşmezse !

Eğer yürüyen merdivenlerin veya taşıyıcı bantların kullanılması gerekiyorsa !

Eğer yakında hayat koruyucu fonksiyonlara sahip tıbbi cihazlar ve teşhis cihazları bulunuyorsa !

Eğer amaca uygun kullanıma muhalif davranılırsa !



UYARI

Ezilmelerden kaçınmak için, cihaz çalışır halde iken dönen / hareket eden parçalara hiç bir zaman dokunmayın !



TEHLİKE

Mevcut yüksek görme engeli ve / veya körlük halinde MM-57 A1 / A2 kullanılamaz !

İzin verilmiş toplam ağırlığı ve azami kişi ağırlığını aşmayınız, çünkü MM- 57 A1/ A2 aracının bozulmasına veya zorlanmasına neden olabilir !

Sınırlı fren etkisi nedeniyle bir kaymayı önlemek için, yağmur, ıslaklık, kar veya buzlanma halinde kullanmayın !

Yolcunun düşmesi, devrilmesi sebebiyle yaralanmaları ve maddi hasarları önlemek için, yürüyen merdivenler veya taşıyıcı bantlar üzerinde kullanmayın !

PAKET ÜZERİNDEKİ SEMBOLLERİN AÇIKLANMASI VE KARGO

Sembol	Açıklama
	Dikkatli davranın Paket ve ürüne dikkatli davranılmalıdır.
	Islaklıktan koruyun Paket ve ürünü yüksek nemden koruyun. Üzerini örterek depolayın. Gerekirse branda ile özenli şekilde kapatın.
	Dikkat kırılabilir Paket ve ürüne özenle davranın ve kesinlikle devirmeyin.
	Bu taraf yukarı Paket, oklar daima yukarıyı gösterecek şekilde depolanmalı ve taşınmalıdır. Paketi yuvarlayarak veya aşırı yatırarak bu kuralın ihlalinin kaçınılmalıdır.

KARGO : Satılan ürünler Mec Çözüm Ortaklığı tarafından ürüne uygun tasarlanmış ve üzerine yukarıdaki uyarı etiketleri ile birlikte İstanbul içine elden teslimat, diğer iller kargo , yurt dışı ise müşterinin talebine göre nakliye edilmektedir.

Teslimat Kapsamı



① Şarj aleti , kılavuz ve cihaz ② Akü paketi ③ MM - 57


CİHAZA GENEL BAKIŞ

AKTARAN MM- 57 A1



CİHAZA GENEL BAKIŞ

AKTARAN MM- 57 A2

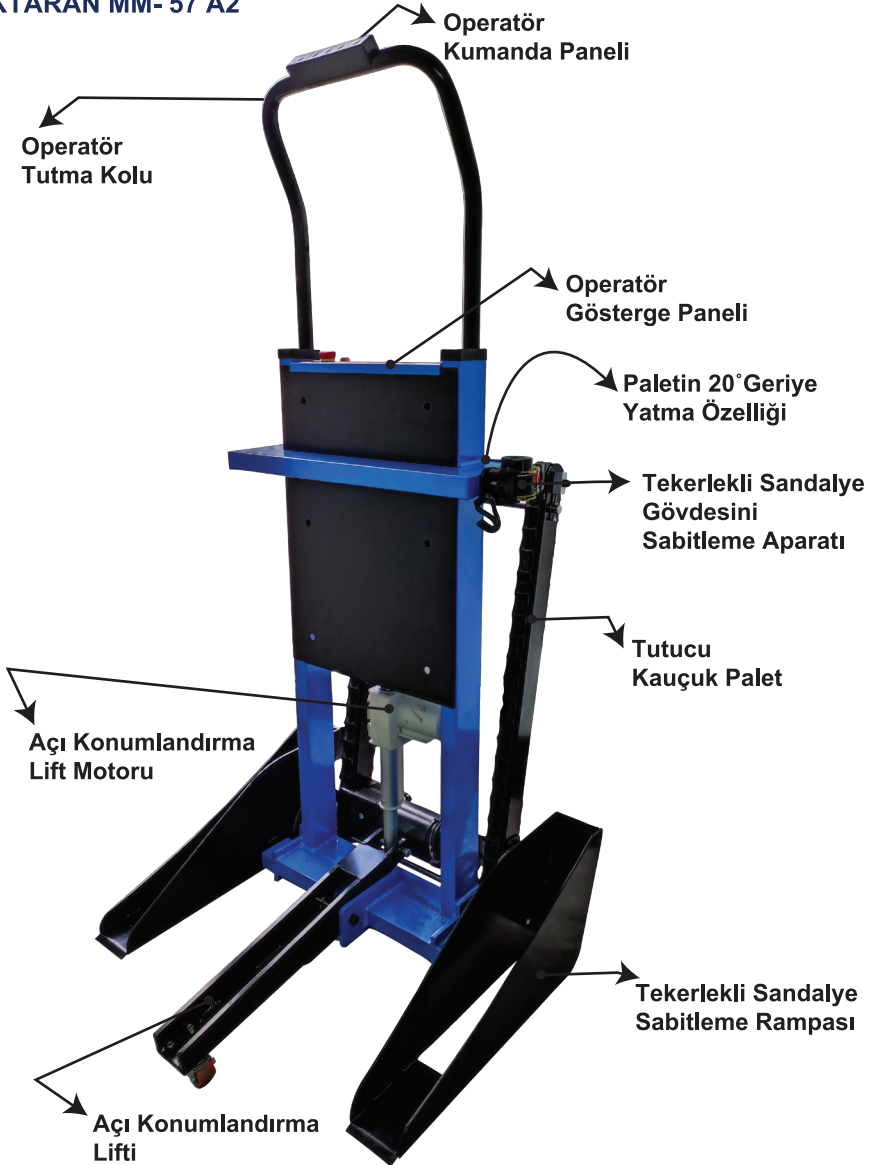

CİHAZA GENEL BAKIŞ

AKTARAN MM-57 SP1




AKTARAN MM-57 A1 - A2

ÖLÇÜLENDİRMESİ

- Operatör tutma kolu;
min. 1.20 cm max. 1.60 cm



A1 Cihaz genişliği iki teker arası 47 cm

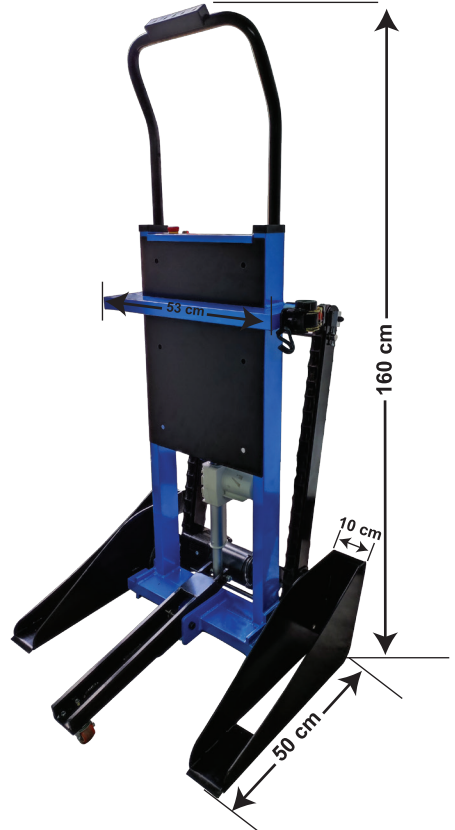

A2 Cihaz genişliği iki sabitleme rampası arası 68 cm

AKTARAN MM-57 SP1

ÖLÇÜLENDİRMESİ

- Operatör tutma kolu;
min. 1.20 cm max. 1.60 cm



Teknik veriler




UYARI İzin verilmiş toplam ağırlık ve azami kişi ağırlığını aşmayınız, çünkü bu durum MM-57 A1 ve MM-57 A2 aracının bozulmasına veya zorlanmasına neden olabilir!

Teknik	MM-57 A1 MM-57 SP1	MM-57 A2 MM-57 SP1
Ebatlar	Yükseklik = asgari 1200 mm - azami 1600 mm Genişlik = 470 mm Genişlik = 680 mm Derinlik Ayak dayanağı dahil = 600 mm	
Aracın ağırlığı	Tırmanma ünitesi = 30 kg. Akü paketi = 6,1 kg. Şarj Aleti= 0.4 kg. Toplam ağırlık = 40 kg.	
Azami kişi ağırlığı	130 kg.	160 kg(sandalye dahil)
Tırmanma hızı ¹⁾	8 - 23 basamak / dakika (sürekli ayarlanabilir.)	
Bir akü şarjıyla ulaşma mesafesi ¹⁾	1 dk 15 basamak (1 basamak zm:sn = 0,5)	
Azami basamak yüksekliği	180 / 250 mm (tırmanma yüksekliğini artırma halinde) / 35°	
Asgari basamak derinliği	300 mm	
Gerekli merdiven genişliği (düz merdiven)	700 mm	
Akü	2 x 12 V / 9 Ah (Akü)	
Doğru akım motoru	24 V / 120 Watt	
Tam Dolu Akü ile Sürüş	Maks. Yükte 35 kat (Kat yüksekliği 3 metre)	
Seri Numarası Etiket	Operatör gösterge panelinin üstünde ve kullanım kılavuzunun önünde	

1) Etkinleştirilmiş konfor basamağında, tırmanma hızı ve ulaşma mesafesi düşer. Ulaşma mesafesi, yolcunun ağırlığına da bağlıdır.

A1/A2 (OPSİYONEL AKSESUAR)

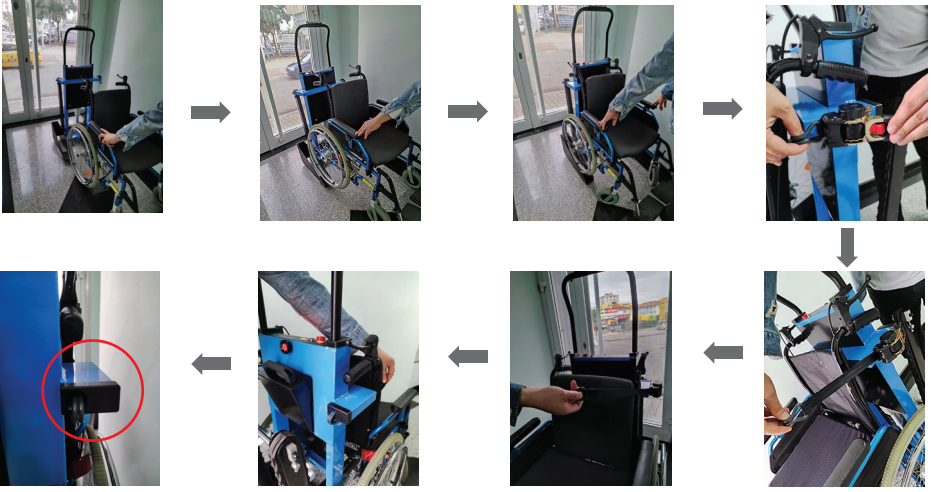

Dirseklilikleri Yerleştirme



TEHLİKE - Devrilme tehlikesi olduğundan , kol yaslamalara tek taraflı yük bindirilmemelidir !



TEHLİKE - Kol yaslamaya hiç bir nesne (mesela çanta) takmayın ! Devrilme tehlikesi !



UYARI - Hiçbir zaman kol yaslamalara oturmayın veya onları taşıma aracı olarak kullanmayın, çünkü kol yaslamalar bu amaçla tasarlanmıştır !



UYARI - MM - 57 aracını kullanırken yolcunun kolları kol yaslama dışına taşmamalıdır !

Kol yaslama , kenarları sınırlandırmaya yarar ve kolları koymak için kullanılabilir.

KOLLARI AYARLAMA (MM - 57 A1)



UYARI - Kol ayarlarının kendiliğinden değişmemesi için kollar, sabitleme civatalarıyla sağlam bir şekilde sabitleştirilmiş olmalıdır !



DİKKAT - Yaralanmaları önlemek için, oluğun bağlantı noktasına dikkat edin !

Kolların sabitleme civatalarını saat yönünün tersine döndürün.

Kolları omuz hizasına kadar çıkarın.

Sabitleme civatalarını sıkın.

TEHLİKE!

X

Bu cihaz döner merdivende kullanmaya uygun değildir.

MM - 57 aracı , uygun olmayan merdivenlerde kullanılamaz, aksi takdirde merdivenden düşmeye sebep olabilir!


Merdiven inme - Döner merdivenler

Döner merdivenlerde kullanımda bölüm 8.5>de açıklanan adımlar uygulanmalıdır.

Lütfen dikkat edin: Bir döner merdivende (sahanlıklı düz merdiven) MM-57 aracı, merdivenin dönüşüne göre ayarlanmalıdır. Her iki tekerlek, her tırmanma işleminde merdivenin köşesine dayanmalıdır.

AKTARAN MM-57 A1

• Operatör Kumanda Paneli

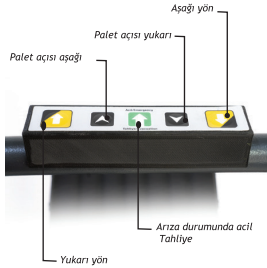


• Operatör Gösterge Paneli



AKTARAN MM-57 SP1

• Operatör Kumanda Paneli

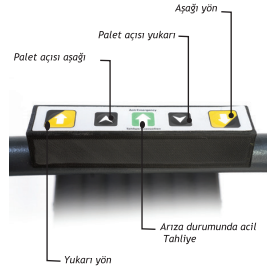


• Operatör Gösterge Paneli



AKTARAN MM-57 A2

• Operatör Kumanda Paneli

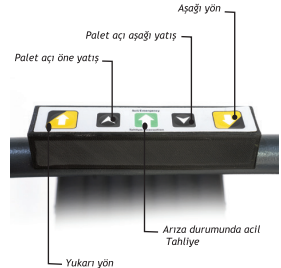

• Operatör Gösterge Paneli



Engelli Bireyi Cihaza Konumlandırma

MM-57 A1 / MM-57 SP1

1. Koltuk kısmını cihaza sabitleyin.
2. Engelli bireyi sandalyesinden cihaza oturtun.
3. Emniyet kemerini vücuduna tam oturacak şekilde ayarlayın.

Talimatlara uygun şekilde kullanıma başlayın ve adımları tersten izleyerek engelli cihazdan indirin.

MM-57 A2

1. Alt palet kısmını cihaza sabitleyin.
2. Paletin alt kısmındaki rampaları açın.
3. Tekerlekli sandalye ile cihazı palete çıkarın.
4. Tekerlekli sandalyeyi cihaza alt kolçaklardan sabitleyin.

Talimatlara uygun şekilde kullanıma başlayın ve adımları tersten izleyerek engelli cihazdan indirin.

ÇALIŞTIRMA

1. Engelli bireyi verilen talimatlar doğrultusunda MM-57 A1/AA2'ye yerleştirin.
 - 1.1 Eğer MM-57/A2 kullanacaksanız kilitlerin tam takılı olduğundan emin olun.
 2. Tekerlek yardımı ile cihazı kullanılacak basamakların önüne konumlayın
 - 2.1. Bu cihaz döner merdivenlerde kullanmaya uygun değildir.
 3. Kolçak üzerindeki POWER tuşunu çalıştırın.
 4. Kullanıcı panelinde ki akü göstergesinden akünün dolu olduğundan emin olun.
 5. Joistiği ileri hareket ettirerek paletin merdivenlere uygun pozisyona gelmesini sağlayın.
 6. Uygun pozisyona geldiğinde joistiği bırakın.
 7. Kullanıcı kolçağında ki kumanda üzerinde ki YUKARI YÖN tuşu ile tırmanıcının ilerlemesini sağlayın.
 8. Bu paletler sürekli sürüşe uygundur.
 9. Kullanımı durdurmak istediğinizde tuşu bıraktığınızda paletler basamağa sabitlenir ve kayma yapmaz.
 10. Geri hareket etmeniz gereken durumlarda AŞAĞI YÖN tuşu ile tırmanıcının ilerlemesini sağlayın.
 11. Transfer tamamlandığında joistik ile paleti kapalı duruma gelene kadar ileri yönlendirin.
 12. Power veya Acil durum stop düğmesi ile cihazı kapatın.
 13. MM-57 A1 ve MM-57 SP1 Kullanıyorsanız engelli emniyet kemerini açarak indirin.
- MM-57 A2 Kullanıyorsanız kilitleri açın ve engelli bireyi cihazdan indirin.



AKTARAN MM- 57 A1



AKTARAN MM- 57 A2



AKTARAN MM-57 SP1

Düz zeminde sürüş / Engellerin aşılması

MM 57-A2 kontrol panelinde sol tarafta bulunan yön tuşuyla cihazı geriye doğru konumlandırın. Araç dengelenmelidir. Operatör üzerine yük bindiğinin hissedilmediğinde kullanıma uygun hale getirilmelidir.



Kullanım Uyarıları

- ⚠ TEHLİKE - Sadece bedensel ve ruhsal açıdan MM-57 A1 ve MM-57 A2 aracını kullanabilme durumunda olan eğitilmiş bir kişi tarafından kullanılabilir!
- ⚠ TEHLİKE - MM-57 A1 ve MM-57 A2 aracının altında tehlike alanında herhangi bir kişi bulunmamalıdır!
- ⚠ TEHLİKE - Her kullanımdan önce güvenlik frenleri kontrol edilmelidir! (bak. Bölüm 6.6)

- ⚠ UYARI - Merdivenden kaymayı önlemek için kaymaz ayakkabı giyiniz!
- ⚠ UYARI - Tehlike durumlarını önlemek ve tırmanma işleminin güvenli olmasını sağlamak için, daima iki elle kullanın!
- ⚠ UYARI - Düşmeleri önlemek için, ıslak, kaygan veya yıkanmış merdivenlerde kullanmayın! Halı altlıkları kaymaz olmalıdır!
- ⚠ UYARI - Kollar yan tarafa sarkmamalı veya kontrolsüz bir güçle hareket ettirilmemelidir. Kolları baldır veya dirseklik üzerine koyun!
- ⚠ UYARI - Yolcunun düşmesini önlemek için, kendi başına oturamayan kişileri kemerlerle emniyete (opsiyonel aksesuar) alın ACİL STOP butonunun kapalı olduğundan emin olun.
- ⚠ UYARI - Cihazı Şarj ederken ACİL STOP butonunun açık olduğundan emin olun.

- NOT - Yolcu olmadan ve tek basamak çalıştırma işlemini talim edin.
- NOT - Merdiven basamağının derinliğine ve yapısına dikkat edin ! Düşme tehlikesi
- NOT - Minder kullanılması halinde (yastık v.b.) kayma veya düşmeyi önlemek için yolcunun güvenli bir şekilde oturmasına dikkat edilmelidir.

Acil Durum

MM-57 aracı,merdiven basamaklarında zemin üzerinde olmalıdır. Cihaz lift konumlandırma butonuyla ayarladıktan sonra ACİL STOP butonu ile kapatınız.



Park etme

- NOT - Aküleri her kullanımdan sonra doldurun.
- NOT - MM - 57 aracını dikey şekilde yerleştirin.

Paleti kullanıcı panelinden POWER tuşu ile kapatıp , toz , nem veya su ile temas etmeyeceğinden emin olduğunuz bir yere konumlayın.

Nakliye



UYARI - Münferit parçaların ağırlık bilgilerine dikkat edin!



UYARI - Araçlar içinde taşınması halinde geçerli kanuni şartları sağlayın !



DİKKAT - MM - 57 aracını nakliye sırasında kapatın !

Akü ve Şarj Aleti



NOT - İki yılda bir güvenlik tekniği kontrolü yapılması tavsiye edilir! Kontrol etiketi, kontrolün yapılacağını en geç zaman hakkında bilgi verir.

Tavsiye: Tekrar kullanımdan sonra / Kullanıcı değiştirme!



DİKKAT - Elektrik çarpmasını ve arızaları önlemek için, nemden koruyun ve nemli ellerle dokunmayın!



NOT - Aküleri her kullanımdan sonra doldurun.



NOT - Şarj aletini yağ gres agresif temizlik maddeleri, tiner veya hasarlardan koruyun.



NOT - Şarj alet kullanım kılavuzuna uyun.



NOT - Akünün tamamen boşalması, kapasite kaybına sebep olur ve kullanım ömrünü kısaltır.



NOT - Aküyü göndermeden önce (tamirat, bertaraf etme vs...) Akü paketini emniyetli bir şekilde paketleyin. Özel bir karton gerekli değildir.

Yeni aküler, ancak birkaç defa doldurulduktan sonra tam kapasiteye ulaşır. Aküler, bakım gerektirmez ve tekrar doldurulabilir.



Fişlerinizi temiz tutun



LED kırmızı = akü dolduruluyor



LED yeşil= akü dolu

Temizlik



UYARI - Temizlik süresince sigara içmeyin!



UYARI - Aracın içine nem girmemelidir!

Sadece nemli bezler kullanın. Islak bezleri kesinlikle kullanmayın!



NOT - MM - 57 aracını ateş kaynaklarından uzak tutun!

NOT - Yüksek basınçlı temizleyici kullanmayın!

Kumaş yüzeyleri ve ciltle temas eden yüzeyleri, ihtiyaç halinde temizleyin.

- » Evde kullanılan temizlik maddelerini kullanın. Diğer tüm parçaları da yumuşak ev tipi temizlik maddeleriyle silin.
- » Her kullanımda temizlik maddesi üreticilerinin talimatlarına uyun!

Dezenfekte ihtiyacı olması halinde, evde kullanılan dezenfeksiyon maddelerinden kullanın ve üretici talimatlarına uyun. Silerek dezenfekte edin.



Sigortaları değiştirme

NOT - Bozuk sigortaları tamir etmeyin veya köprülemeyin !

NOT - Sigorta sıkça yanarsa, üretici veya yetkili satıcıyla iletişime geçin!

Güvenlik tekniği açısından inceleme



UYARI - Güvenlik tekniği açısından inceleme, sadece üretici, MEC DANIŞMANLIK servisi veya yetkili satıcı tarafından gerçekleştirilebilir!



UYARI - Her iki yılda bir güvenlik tekniği kontrolü yapılması tavsiye edilir! Kontrol etiketi, kontrolün yapılacağı en geç zaman hakkında bilgi verir!

Tavsiye: Tekrar kullanımdan sonra / Kullanıcı değiştirme !

Güvenlik tekniği açısından inceleme yapabilmek için bir eğitim gereklidir. Daha fazla bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz. www.meccozum.com

Tekrar kullanım (Kullanıcı deęiřtirme)


X hastasının kullandığı MEC DANIřMANLIK ürününün başka bir Y hastasında kullanılmaya başlaması durumu , tekrar kullanım olarak adlandırılır. Lütfen MEC DANIřMANLIK servisine veya yetkili satıcıya başvurun.

MM - 57 aracı, tekrar kullanıma uygundur. Her tekrar kullanımdan önce bir güvenlik teknięi açısından inceleme ve bir temizlik / dezenfeksiyon uygulanmalıdır.

Resmi işlemler (ruhsatlandırma vb.)için satın alınan ürünler tekrar kullanıma uygun deęildir.

Bertaraf etme

MM - 57 aracınız ve aküsü uzun ömürlü ürünlerdir. Doğal ömrünü doldurduktan sonra bu ürünleri, Mec Çözüm Danışmanlık şirketine veya bayilerine bertaraf edilmek üzere gönderebilirsiniz.

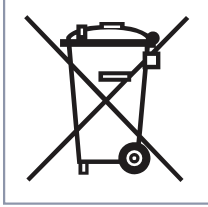

MM-57 aracı ve aküsü , ilgili ülkede meri güncel kanunlara göre öngörülmeyen yerlerde bertaraf edilemez (mesela çöplükler). Çevreye zararlı olduęu belirlenebilecek maddeler içerebilir.

MM - 57 aracı uzun süre kullanılmazsa, (mesela birkaç ay) aşağıdakilere uyun:

Aracın içine nem girmemelidir.

MM-57 aracını, kuru mekanlarda ve nemi yüksek olmayan yerlerde depolayın, gerekirse folyoyla kapatın!

Sürekli güneř ışığından koruyun!

Yetkisiz kişiler ve özellikle çocuklar, MM-57 aracının depolama alanına gözetimsiz erişim imkanına sahip olmamalıdır !

MM-57 tekrar iletişime alınacaksa, önce temizleyin. Güvenlik teknięi açısından inceleme gerekip gerekmediğini kontrol edin.

Güvenlik teknięi açısından inceleme gerekiyse, işleme almadan önce elektrik fonksiyonu ve güvenlik frenleri mutlaka test edilmelidir!



UYARI - Anormal gelen tüm çalışma tarzlarında, tehlikeli durumları önlemek için MM-57 aracını kullanmayı bırakın!

Mec Çözüm teknik servisi ile hemen iletişime geçin ve cihazı kullanmayı bırakın.

Problem Çözme Yöntemleri

Problem	Test ve muhtemel problem çözümleri
MM-57 aracı çalışmıyor	Spiral kablo bağlantısı takılı ve kilitli mi? Hayır: takın ve kilitleyin.
	Şarj aleti takılı mı? Evet: Şarj kablosunu çıkarın.
	Akü boş mu? Evet: Aküyü doldurun.
	Problem hala mevcut mu? Evet: Üreticiyi, Mec Çözüm Danışmanlık servisini, yetkili satıcıyı bilgilendirin.
MM-57 aracı sürülmüyor	Emniyet butonu açık mı? Evet: Çevirerek kapalı konumuna getirin.
Aküler doldurulamıyor	Üreticiyi, MEC DANIŞMANLIK servisini, yetkili satıcıyı bilgilendirin.
Akülerde harici hasarlar var	Üreticiyi, MEC DANIŞMANLIK servisini, yetkili satıcıyı bilgilendirin.

Garanti ve Sorumluluk

MEC DANIŞMANLIK firması, MM-57 aracı (kurşun aküler hariç) ve tüm aksesuar parçaları için, müşterinin aracı aldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle araçta malzeme ve üretim hatalarının bulunmadığı garantisini vermektedir.

Aküler için MEC DANIŞMANLIK firması, müşterinin aküyü aldığı tarihten itibaren 6 ay boyunca garanti vermektedir.

MM- 57 aracı ile ilgili garanti , aşağıdaki nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan arızaları kapsamaz:

- » Aşırı yüklenme sonucu ortaya çıkan hasarlar.
- » Dikkatsiz kullanım nedeniyle oluşan hasarlar.
- » Şiddete dayalı hasarlar.
- » Doğal aşınma parçalar(kauçuk paletler)
- » Müşteri tarafından yapılan usulüne uygun olmayan veya yetersiz bakım.
- » Yetkisiz yapısal değişiklikler veya MM-57 aracının veya aksesuar parçalarının amacına aykırı şekilde kullanılması
- » MM-57 aracının izin verilmiş toplam ağırlık veya azami kişi ağırlığı üzerinde kullanılması.
- » Aküleri usulüne aykırı şarj etme.

MEC DANIŞMANLIK firması, MM-57 aracının üreticisi olarak aşağıdaki nedenlerden oluşan hasarlar için sorumlu değildir:

- » MM-57 aracının usulüne aykırı kullanıldıysa.
- » Tamirat, montajlar veya diğer işler yetkisiz kişilerce yapıldıysa.
- » MM-57 aracı kullanım kılavuzuna aykırı kullanıldıysa.
- » Yabancı parçalar takıldı veya MM-57 aracına bağlandıysa.
- » MM- 57 aracının parçaları söküldüyse.
- » MM-57 aracı, izin verilmiş toplam ağırlıktan veya azami kişi ağırlığından fazla yüklendiyse.
- » MM-57 aracına; üretici, MEC DANIŞMANLIK servisi veya bir yetkili satıcı tarafından düzenli bir şekilde (2 senelik aralıklarla) bakım yapılmadıysa.
- » Reşit olmayan kişiler MM-57 aracını denetimsiz şekilde kullanırsa (denetim altında eğitilmiş 18 yaş üstü reşit olmayan gençler hariç).
- » MM-57 aracı yetersiz aküyle çalıştırıldıysa.

Geri çağırımlar ve düzeltici tedbirler

MM-57 aracınızın kullanılmasıyla ilgili yeni ve önemli güvenlik bilgilerinin mevcut olması halinde, tarafımızdan bilgilendirilirsiniz. Başta da söylendiği gibi, internet sayfamızda bu kullanım kılavuzunun daima güncel sürümünü görebilirsiniz.

Sonradan değişiklikler veya üründe düzeltici tedbirler alınması gerekmesi durumunda, sizi ve /veya yetkili satıcımızı bundan etkilenecek tüm seri numaraları hakkında bilgilendiririz. Eğer MM-57 aracınız bir geri çağırma aksiyonuna dahil olursa, daha sonra sonraki bütün süreç hakkında bilgilendirilirsiniz.

Notlar:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notlar:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notlar:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

GARANTİ BELGESİ

MEC ÇÖZÜM ORTAKLIĞI

AKTARAN MM-57



Cihaz Seri No: 0509 _____

*İş Bu belge geçerlilik süresi, ilgili seri numaralı cihaz için kesilmiş
fatura tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerlidir.



Mec Çözüm Ortaklığı Mak. Dış. Tic. Ltd. Şti

Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad.
No: 904 / A Ümraniye - İstanbul
Tel: 0216 540 13 84

Malın

Cinsi	:	Engelli Eriřim Cihazı	Garanti Süresi : 2 YIL / Akü - 6 Ay
Markası	:	AKTARAN	Azami Tamir Süresi : 15 İş Günü
Modeli	:	MM-57 A1 / MM-57 A2 - MM-57 SP1	Bandrol ve Seri No : 0509

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın aküsü 6 ay diğer parçaları 2 yıl garantisi kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı;
işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin asılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin anızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirmiş tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın anızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



Kullanıcı Eğitim Sertifikası

Sayın,

Tarih : / /

Yeterlilik ölçęi kapsamında tüm bilgi ve eğitimi alarak AKTARAN MM-57 / A1 A2 - SP1 merdiven tırmanma cihazını kullanmaya tam yetkilidir.

ADI SOYADI:

T.C Kimlik No.:

ADI SOYADI:

T.C Kimlik No.:

Cihaz Seri No:

TSE ISO 7176 28 Kasım 2014





Satış Destek
0549 487 57 57

Teknik Destek
0549 488 57 57
info@meccozum.com



www.meccozum.com